


# SOLICITUD DE SILLA DE RUEDAS



INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del usuario:	Fecha de nacimiento y edad:
Dirección:	
Teléfono:	Nombre del cuidador (si corresponde):
CONDICIÓN FÍSICA Y CONSIDERACIONES	
Diagnóstico:	
Pre	Observar
<b>¿Tiene certificado médico o gubernamental?</b> <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<b>¿Puede el usuario levantar su cabeza de manera segura?</b> <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
<b>¿Actualmente tiene silla de ruedas?</b> <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<b>¿Puede el usuario sentarse de forma segura?</b> <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
<b>¿Dónde usará o a dónde irá con esta silla de ruedas?</b> <input type="checkbox"/> Casa <input type="checkbox"/> Comunidad <input type="checkbox"/> Trabajo <input type="checkbox"/> Transporte público <input type="checkbox"/> Zonas rurales <input type="checkbox"/> Otras: _____	<b>Este usuario puede entrar y salir de una silla de ruedas:</b> <input type="checkbox"/> Independientemente <input type="checkbox"/> Con asistencia de 1 persona <input type="checkbox"/> Con asistencia de 2 personas
<b>¿Cuál es su experiencia con una silla de ruedas?</b>	<b>Notas:</b>
ÚLCERA POR PRESIÓN/PIEL	
<b>¿La persona tiene una úlcera por presión?</b> <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<b>En caso afirmativo, describa:</b> 
<b>¿Tiene la persona antecedentes de úlceras por presión?</b> <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
RECOMENDACIÓN Y PRESCRIPCIÓN	
<input type="checkbox"/> GEN_2 <input type="checkbox"/> GEN_3 REFERENCIA DE SALIDA: _____	
<div> <div>Nombre</div> <div>Organización</div> <div>Fecha de hoy</div> </div>	

# FORMULARIO DE APTITUD PARA SILLA DE RUEDAS



Nombre del Usuario:	Fecha de Hoy:
---------------------	---------------

**MIDA ESTAS TRES ÁREAS:** No doble la cinta métrica.

<p><b>Nº 1 ANCHO DEL ASIENTO:</b></p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 60px; margin-bottom: 10px; position: relative;"> <span style="position: absolute; right: 10px; top: 50%; transform: translateY(-50%);">CM</span> </div> <input type="checkbox"/> Medida fácil: (barra transversal)             <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 150px; height: 10px; margin-top: 10px;"></div> </div> </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="background-color: black; color: white;">ANCHO DEL ASIENTO (CM) TAMAÑO ✓</th> </tr> <tr> <th colspan="3" style="background-color: #f2f2f2;">GEN_2</th> </tr> <tr> <td style="width: 40%;">25cm- 33cm</td> <td style="width: 40%;">GEN_2 S</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>33cm- 38cm</td> <td>GEN_2 M</td> <td></td> </tr> <tr> <td>38cm- 43cm</td> <td>GEN_2 L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>43cm-48cm</td> <td>GEN_2 XL</td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="3" style="background-color: #f2f2f2;">GEN_3</th> </tr> <tr> <td>25cm- 31cm</td> <td>GEN_3 S</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31cm- 36cm</td> <td>GEN_3 M</td> <td></td> </tr> <tr> <td>36cm- 40cm</td> <td>GEN_3 L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40cm- 47cm</td> <td>GEN_3 XL</td> <td></td> </tr> </table>	ANCHO DEL ASIENTO (CM) TAMAÑO ✓			GEN_2			25cm- 33cm	GEN_2 S		33cm- 38cm	GEN_2 M		38cm- 43cm	GEN_2 L		43cm-48cm	GEN_2 XL		GEN_3			25cm- 31cm	GEN_3 S		31cm- 36cm	GEN_3 M		36cm- 40cm	GEN_3 L		40cm- 47cm	GEN_3 XL	
ANCHO DEL ASIENTO (CM) TAMAÑO ✓																																		
GEN_2																																		
25cm- 33cm	GEN_2 S																																	
33cm- 38cm	GEN_2 M																																	
38cm- 43cm	GEN_2 L																																	
43cm-48cm	GEN_2 XL																																	
GEN_3																																		
25cm- 31cm	GEN_3 S																																	
31cm- 36cm	GEN_3 M																																	
36cm- 40cm	GEN_3 L																																	
40cm- 47cm	GEN_3 XL																																	
<p><b>Nº 2 LONGITUD DE ASIENTO:</b></p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 60px; margin-bottom: 10px; position: relative;"> <span style="position: absolute; right: 10px; top: 50%; transform: translateY(-50%);">CM</span> </div> <input type="checkbox"/> Medida fácil: (asiento)             <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 150px; height: 10px; margin-top: 10px;"></div> </div> </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="background-color: black; color: white;">LONGITUD DEL ASIENTO (CM) POSICIÓN ✓</th> </tr> <tr> <td style="width: 40%;">Menos de 41cm</td> <td style="width: 40%;">EL MÁS CORTO</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>41cm- 47cm</td> <td>MEDIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Más de 47cm</td> <td>EL MÁS LARGO</td> <td></td> </tr> </table>	LONGITUD DEL ASIENTO (CM) POSICIÓN ✓			Menos de 41cm	EL MÁS CORTO		41cm- 47cm	MEDIO		Más de 47cm	EL MÁS LARGO																						
LONGITUD DEL ASIENTO (CM) POSICIÓN ✓																																		
Menos de 41cm	EL MÁS CORTO																																	
41cm- 47cm	MEDIO																																	
Más de 47cm	EL MÁS LARGO																																	
<p><b>Nº 3 ALTURA DE RESPALDO:</b></p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 60px; margin-bottom: 10px; position: relative;"> <span style="position: absolute; right: 10px; top: 50%; transform: translateY(-50%);">CM</span> </div> <input type="checkbox"/> Medida fácil: (respaldo)             <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 150px; height: 10px; margin-top: 10px;"></div> </div> </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="background-color: black; color: white;">ALTURA TRASERA (CM) POSICIÓN ✓</th> </tr> <tr> <td style="width: 40%;">Mayor a los 52cm</td> <td style="width: 40%;">LA MÁS ALTA</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>48cm- 52cm</td> <td>ALTURA MEDIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>44cm-48cm</td> <td>SEMI BAJO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menos de 44cm</td> <td>EL MÁS BAJO</td> <td></td> </tr> </table>	ALTURA TRASERA (CM) POSICIÓN ✓			Mayor a los 52cm	LA MÁS ALTA		48cm- 52cm	ALTURA MEDIA		44cm-48cm	SEMI BAJO		Menos de 44cm	EL MÁS BAJO																			
ALTURA TRASERA (CM) POSICIÓN ✓																																		
Mayor a los 52cm	LA MÁS ALTA																																	
48cm- 52cm	ALTURA MEDIA																																	
44cm-48cm	SEMI BAJO																																	
Menos de 44cm	EL MÁS BAJO																																	

# LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y APTITUD PARA EL USO




Utilice este formulario para revisar la silla de ruedas después del armado.

<b>VERIFICAR EL CONJUNTO DE SILLAS DE RUEDAS</b>		✓
El respaldo y las correas del asiento están alrededor del marco de metal.		
La correa de la pantorrilla pasa sólo a través del lazo de metal delgado.		
El cojín del asiento está conectado al velcro y la inclinación es hacia el frente.		
Las partes afiladas de los tornillos están lejos de la persona.		
El respaldo se asienta sobre el cojín.		
Los casquillos negros cubren los tornillos de rueda.		
Las llantas de empuje son del mismo tamaño.		
El cinturón de seguridad está conectado más abajo que el posabrazos.		
<b>TODA LA SILLA DE RUEDAS</b>		✓
No hay bordes afilados.		
La silla de ruedas se desplaza en línea recta		
Los pernos del marco están apretados.		
<b>RUEDAS TRASERAS Y RUEDAS CASTOR</b>		✓
Las ruedas traseras y las ruedas giratorias giran libremente.		
Los pernos del eje son seguros.		
Los neumáticos traseros están inflados correctamente (siga el PSI en el neumático o presione menos de 5 mm).		
Las llantas de empuje estén firmes.		
<b>FRENOS</b>		✓
Los frenos funcionan correctamente y son fáciles de jalar para bloquearlos.		
<b>POSAPIÉS</b>		✓
Los posapiés estén sujetos de forma segura		
<b>INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD:</b>		✓
Envíe una imagen, el número de pedido y una descripción del problema al WhatsApp: <b>+1 (323) 996-9198.</b>		
<b>NOTAS:</b>		

# FORMULARIO DE CONFIRMACIÓN DE APTITUD



Use este formulario como guía para verificar si ha ajustado correctamente la silla de ruedas para el usuario de la silla de ruedas.

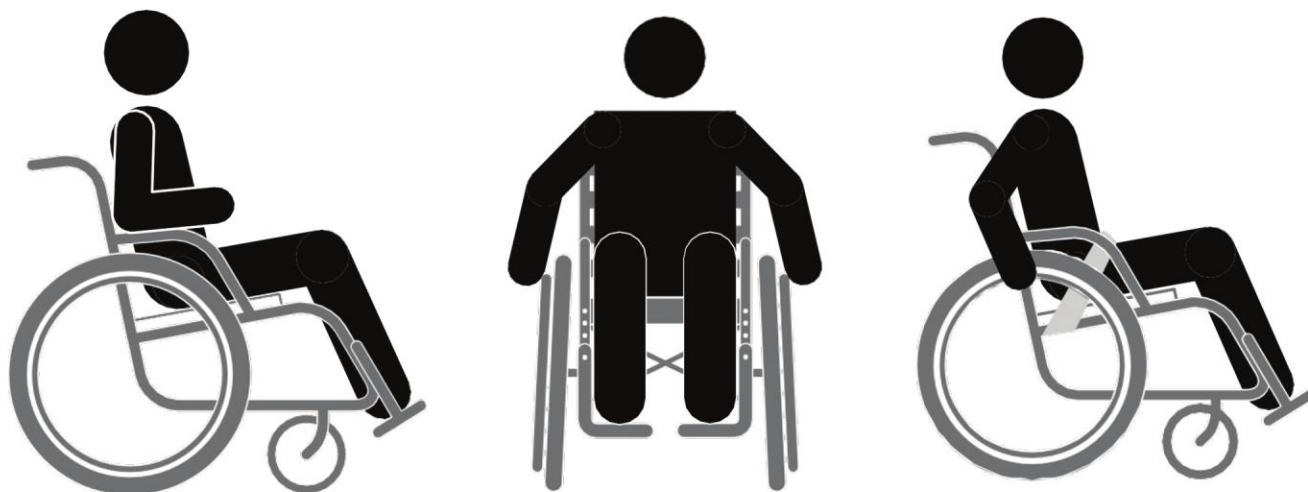

COMPRUEBE EL AJUSTE		✓
Las caderas del usuario deben estar en la parte posterior de la silla de ruedas.		
Los pies del usuario deben estar sobre los posapiés.		
Debe haber espacio para 2-3 dedos entre la parte superior del respaldo y la parte inferior de los omóplatos del usuario.		
Si el usuario no se auto impulsa, mueva el respaldo hacia arriba para mayor comodidad. *El respaldo no debe ir más alto que los hombros.		
Debe haber espacio para un ancho de mano vertical entre el marco y las caderas del usuario. *No debe haber presión en los costados del usuario.		
Deje espacio para 2-3 dedos de ancho entre el frente del asiento y la parte trasera de la rodilla del usuario.		
El cinturón de seguridad debe estar bajo en las caderas del usuario.		
<div> <div>Nombre</div> <div>Organización</div> <div>Fecha de hoy</div> </div>		



# LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DEL USUARIO



Use esta lista de verificación como guía cuando entrene al usuario de la silla de ruedas y/o a su cuidador.

MANUAL DEL USUARIO		✓
Revise y entregue el manual del usuario.		
Ver información de contacto		
EDUCACIÓN SOBRE ÚLCERAS POR PRESIÓN		✓
Explicar cómo acumular lentamente la cantidad de tiempo que el usuario se sienta en la silla de ruedas.		
Explicar cómo detectar enrojecimiento o llagas cada día.		
Enseñar los 4 ejercicios de alivio de presión (1 minuto cada 15-30 minutos).		
TRANSFERENCIAS		✓
Enseñar a hacer una transferencia independiente.		
Enseñar a hacer una transferencia asistida por 1 persona.		
Enseñar a hacer una transferencia asistida por 2 personas.		
SEGURIDAD		✓
Mostrar cómo configurar los frenos.		
Enseñar la recuperación de caídas.		
Enseñar cómo abrir/cerrar el GEN_3 (si corresponde).		
APTITUDES DE MOVILIDAD		✓
Enseñar a mover la silla de ruedas hacia adelante y hacia atrás.		
Enseñar a girar la silla de ruedas.		
Enseñar a subir y bajar pendientes.		
Enseñar a subir y bajar bordillos.		
Enseñar a subir y bajar escaleras.		
MANTENIMIENTO		✓
Mostrar cómo inflar los neumáticos.		
Explicar cómo apretar las tuercas y los pernos (si están flojos).		
Explicar cómo limpiar el marco de la silla de ruedas con aceite.		
Explicar cómo revisar si hay piezas rotas o dañadas (por ejemplo, amortiguador, frenos, rodamientos).		