


# MISYON NG LIBRENG WHEELCHAIR WORKBOOK





# APLIKASYON SA WHEELCHAIR




PANGKALAHATANG IMPORMASYON	
Pangalan ng Kliyente:	Petsa ng Kapanganakan & Edad:
Address:	
# ng Telepono:	Pangalan ng Mangangalaga (kung naaangkop):
PISIKAL NA KONDISYON AT MGA KONSIDERASYON	
Diyagnosis:	
Mag	Obserbahan
Mayroon ka bang medikal o sertipiko ng gobyerno? <input type="checkbox"/> Oo <input type="checkbox"/> Hindi	Ligtas bang naitataas ng kliyente ang kanilang ulo? <input type="checkbox"/> Oo <input type="checkbox"/> Hindi
Kasalukuyan ka bang may wheelchair? <input type="checkbox"/> Oo <input type="checkbox"/> Hindi	Nakakaupo ka ba nang ligtas? <input type="checkbox"/> Oo <input type="checkbox"/> Hindi
Saan mo gagamitin o pupuntahan gamit ang wheelchair na ito? <input type="checkbox"/> Tahanan <input type="checkbox"/> Komunidad <input type="checkbox"/> Trabaho <input type="checkbox"/> Pamublikong transportasyon <input type="checkbox"/> Mga kabukiran <input type="checkbox"/> Iba pa: _____	Nakakapasok at nakalalabas ang kliyente na ito sa wheelchair: <input type="checkbox"/> Nang nag-iisa <input type="checkbox"/> Sa tulong ng 1 tao <input type="checkbox"/> Sa tulong ng 2 mga tao
Ano ang iyong karanasan sa paggamit ng wheelchair:	Mga Tala:
PRESSURE SORES/BALAT	
May pressure sore ba ang tao? <input type="checkbox"/> Oo <input type="checkbox"/> Hindi	Kung oo, ilarawan: 
May kasaysayan ba ng mga pressure sore ang tao? <input type="checkbox"/> Oo <input type="checkbox"/> Hindi	
REKOMENDASYON AT RESETA	
<input type="checkbox"/> GEN_2 <input type="checkbox"/> GEN_3 REFERRAL OUT: _____	
_____ Pangalan <span style="margin-left: 200px;">Organisasyon</span> <span style="margin-left: 200px;">Petsa Ngayong Araw</span>	

# FORM SA PAG-AANGKOP NG WHEEL CHAIR

Pangalan ng Kliyente:	Petsa Ngayong Araw:
-----------------------	---------------------

**SUKATIN ANG TATLONG LUGAR NA ITO:** Huwag baliktutin ang tape measure.

**# 1 LAPAD NG UPUAN:**



CM


---

Madaling Pagsukat:  
(crossbar)

---

LAPAD NG UPUAN (CM)	SUKAT	✓
<b>GEN_2</b>		
25cm- 33cm	GEN_2 S	
33cm- 38cm	GEN_2 M	
38cm- 43cm	GEN_2 L	
43cm- 48cm	GEN_2 XL	
<b>GEN_3</b>		
25cm- 31cm	GEN_3 S	
31cm- 36cm	GEN_3 M	
36cm- 40cm	GEN_3 L	
40cm- 47cm	GEN_3 XL	

**#2 HABA NG UPUAN:**



CM


---

Madaling Pagsukat:  
(upuan)

---

HABA NG UPUAN (CM)	POSISYON	✓
Mas mababa ng 41cm	PINAKAMAIKLI	
41cm- 47cm	GITNA	
Mas malaki ng 47cm	PINAKAMABABA	

**# 3 TAAS NG SANDALAN SA LIKOD:**

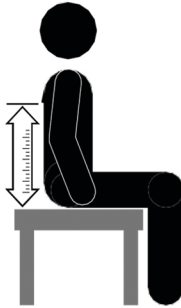

CM

---

Madaling Pagsukat:  
(sandalan sa likod)

---

TAAS NG LIKOD (CM)	POSISYON	✓
Mas malaki ng 52cm	PINAKAMATAAS	
48cm- 52cm	KATAMTAMANG-TAAS	
44cm- 48cm	KATAMTAMANG-TAAS	
Mas mababa ng 44cm	PINAKAMABABA	



# CHECKLIST NG LIGTAS AT HANDA




Gamitin ang form na ito upang suriin ang wheelchair pagkatapos ng pag-assemble.

<b>I-CHECK ANG PAG-ASSEMBLE NG WHEELCHAIR</b>	✓
Ang backrest at seat straps ay nasa paligid ng metal frame.	
Ang calf strap ay sa pamamagitan lamang ng manipis na metal loop.	
Ang seat cushion ay konektado sa Velcro at ang slant ay patungo sa harap.	
Ang matalim na bahagi ng mga turnilyo ay hindi nakakaharap sa tao.	
Ang backrest sits ay nasa ibabaw ng cushion.	
Sinasakop ng black caps ang castor bolts.	
Ang push rims ay pareho ang sukat.	
Ang seatbelt ay konektado na mas mababa kaysa sa armrest.	
<b>BUONG WHEELCHAIR</b>	✓
Walang matatalim na gilid.	
Ang wheelchair ay naglalakbay sa tuwid na linya kapag tinulak.	
Mahigpit ang frame bolts.	
<b>REAR WHEELS AT CASTOR WHEELS</b>	✓
Ang rear wheels at castor wheels ay malayang umikot.	
Nakapirmi ang axle bolts.	
Ang hulihang mga gulong ay nabombahan nang tama (sundin ang PSI sa gulong o depressed nang mas mababa sa 5mm).	
Nakapirmi ang push rims.	
<b>MGA PRENO</b>	✓
Ang preno ay gumana ng maayos at madaling hilain upang i-lock.	
<b>MGA FOOTREST</b>	✓
Ligtas na naka-attach ang mga footrests.	
<b>I-REPORT ANG MGA ISYU SA QUALITY CONTROL:</b>	✓
Magpadala ng larawan, ang PO#, at paglalarawan ng isyu sa WhatsApp: <b>+1 (323) 996-9198.</b>	
<b>MGA PAALALA:</b>	

# FORM NG FIT CONFIRMATION



Gamitin ang form na ito bilang isang gabay upang suriin kung tama mong inayos ang wheelchair para sa gumagamit ng wheelchair.

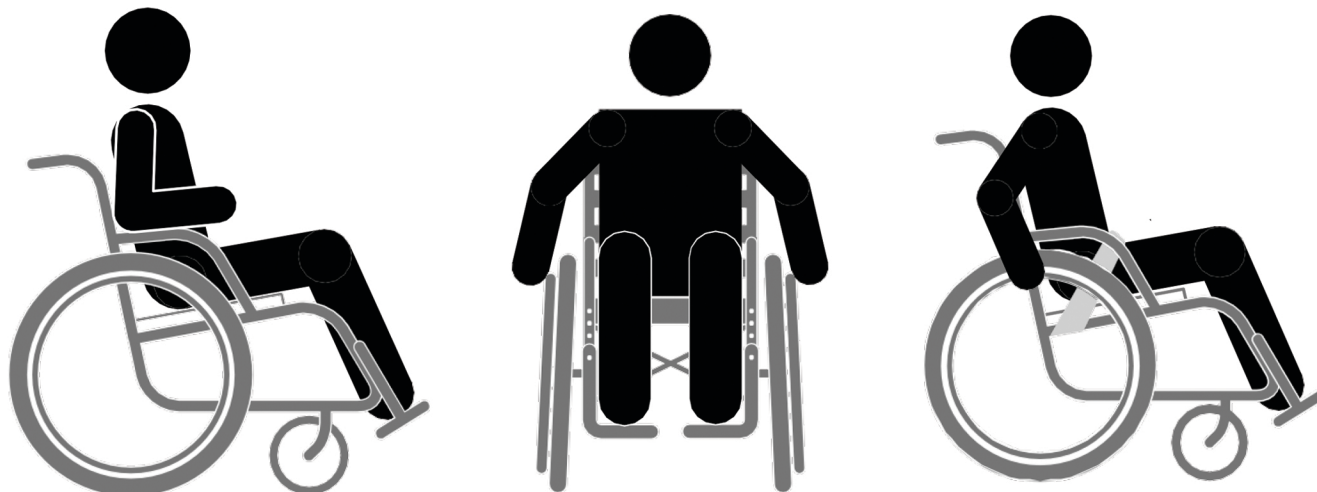

I-CHECK ANG FIT		✓			
Ang balakang ng kliyente ay dapat sa likod ng wheelchair.					
Ang mga paa ng kliyente ay dapat nasa mga footrest.					
Dapat mayroong espasyo para sa 2-3 daliri sa pagitan ng tuktok ng backrest at sa ilalim ng shoulder blades ng kliyente.					
Kung walang sapat na lakas ang kliyente, ilipat ang backrest ng mas mataas para sa ginhawa. *Ang backrest ay hindi dapat mas mataas kaysa sa mga balikat.					
Dapat mayroong puwang para sa isang vertical hand-width sa pagitan ng frame at hips ng kliyente. *Dapat walang presyon sa mga gilid ng kliyente.					
Mag-iwan ng puwang para sa 2-3 daliri sa pagitan ng harap ng upuan at sa likod ng tuhod ng kliyente.					
Ang seatbelt ay dapat na mababa sa balakang ng kliyente.					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Pangalan</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Organisasyon</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Petsa Ngayong Araw</td> </tr> </table>			Pangalan	Organisasyon	Petsa Ngayong Araw
Pangalan	Organisasyon	Petsa Ngayong Araw			

# CHECKLIST SA PAGSASANAY NG GUMAGA



Gamitin ang checklist na ito bilang gabay kapag sinasanay ang gumagamit ng wheelchair at/o ang kanilang tagapag-alaga.

<b>MANWAL NG GUMAGAMIT</b>	✓
Suriin at ibigay ang manwal ng gumagamit.	
Ipakita ang impormasyon ng contact.	
<b>PAGTUTURO SA PRESSURE SORE</b>	✓
Ipaliwanag kung paano dahan-dahang buuin ang dami ng oras na nakaupo sa wheelchair ang kliyente.	
Ipaliwanag kung paano suriin ang pamumula o sugat sa bawat araw.	
Ituro ang 4 na ehersisyo ng ginhawa sa presyon- (1 minuto bawat 15-30 minuto).	
<b>PAGLIPAT</b>	✓
Ituro kung paano gawin ang paglipat nang nag-iisa.	
Ituro kung paano gawin ang 1-taong katulong sa paglipat.	
Ituro kung paano gawin ang 2-taong katulong sa paglipat.	
<b>KALIGTASAN</b>	✓
Ipakita kung paano i-set ang mga preno.	
Ituro ang pagbawi ng pagkahulog.	
Ituro kung paano buksan/isara ang GEN_3 (kung naaangkop).	
<b>MGA KASANAYAN SA KADALIANG KUMILOS</b>	✓
Ituro kung paano igalaw ang wheelchair ng pasulong at paatras.	
Ituro kung paano palikuin ang wheelchair.	
Ituro kung paano umakyat at bumaba dalusdos.	
Ituro kung paano umakyat at bumaba sa mga kurbada.	
Turuan kung paano umakyat at bumaba sa hagdan.	
<b>PAGPAPANATILI</b>	✓
Ipakita kung paano mag-bomba ng mga gulong.	
Ipaliwanag kung paano higpitan ang mga ruskas at turnilyo (kung maluwap).	
Ipaliwanag kung paano linisin ang frame ng wheelchair sa langis.	
Ipaliwanag kung paano i-tsek ang mga nasira o napinsalang mga bahagi (hal. cushion, preno, bearings). cushion, preno, bearings).	