



FREE WHEELCHAIR MISSION

SỔ TAY HƯỚNG DẪN



BẢN KHẢO SÁT XE LĂN



THÔNG TIN CHUNG

Tên khách hàng:	Ngày sinh & Tuổi:
-----------------	-------------------

Địa chỉ:

Điện thoại:	Tên người chăm sóc (nếu có):
-------------	------------------------------

TÌNH TRẠNG THỂ LỰC & TƯ VẤN

Chẩn đoán:

Hỏi	Quan sát
Bạn có giấy chứng nhận y tế không? <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	Người ngồi xe lăn có thể giữ đầu của họ an toàn không? <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
Hiện tại bạn có xe lăn không? <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	Người ngồi xe lăn có thể đứng lên an toàn không? <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
Bạn sẽ sử dụng hoặc đi đâu với chiếc xe lăn này? <input type="checkbox"/> Nhà <input type="checkbox"/> Cộng đồng <input type="checkbox"/> Công ty <input type="checkbox"/> Phương tiện công cộng <input type="checkbox"/> Vùng nông thôn <input type="checkbox"/> Khác: _____	Người ngồi xe lăn có thể lên và xuống xe lăn: <input type="checkbox"/> Tự lực <input type="checkbox"/> Với sự hỗ trợ của 1 người <input type="checkbox"/> Với sự hỗ trợ của 2 người
Kinh nghiệm sử dụng xe lăn của bạn:	Ghi chú:

LOÉT ĐIỂM TỦY/DA

Hiện bạn có bị loét điểm tủy không? <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	Nếu có, hãy mô tả: 
Bạn có từng bị loét điểm tủy không? <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	

KHUYẾN NGHỊ

<input type="checkbox"/> GEN_2 <input type="checkbox"/> GEN_3 GIỚI THIỆU: _____	Tên	Tổ chức	Ngày
_____	_____	_____	_____


BIỂU MÃU KÍCH THƯỚC XE LĂN

Tên khách hàng:

Ngày:

ĐO BA VÙNG NÀY: Đừng để thước dây bị cong.

#1 CHIỀU RỘNG GHẾ:

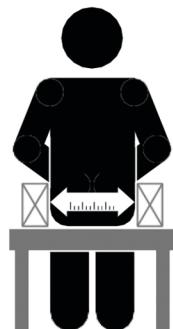

Dễ dàng đo:
(thanh ngang)

CHIỀU RỘNG GHẾ (CM) KÍCH THƯỚC ✓

GEN_2

25cm- 33cm	GEN_2 S	
33cm- 38cm	GEN_2 M	
38cm- 43cm	GEN_2 L	
43cm- 48cm	GEN_2 XL	

GEN_3

25cm- 31cm	GEN_3 S	
31cm- 36cm	GEN_3 M	
36cm- 40cm	GEN_3 L	
40cm- 47cm	GEN_3 XL	

#2 CHIỀU DÀI GHẾ:




Dễ dàng đo:
(ghế)

CHIỀU DÀI GHẾ (CM) VỊ TRÍ ✓

< 41cm	NGẮN NHẤT	
41cm- 47cm	TRUNG BÌNH	
> 47cm	DÀI NHẤT	

#3 CHIỀU CAO TỰA LƯNG:

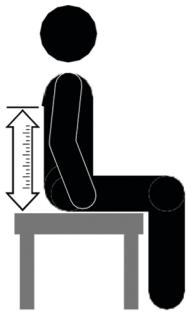

Dễ dàng đo:
(tựa lưng)

CHIỀU CAO TỰA LƯNG (CM) VỊ TRÍ ✓

> 52cm	CAO NHẤT	
48cm- 52cm	TRUNG - CAO	
44cm- 48cm	TRUNG - THẤP	
< 44cm	THẤP NHẤT	

KIỂM TRA AN TOÀN VÀ SẴN SÀNG




Sử dụng mẫu này để kiểm tra xe lăn sau khi lắp ráp.

KIỂM TRA LẮP RÁP XE LĂN	✓
Phần tựa lưng và dây đai an toàn bao quanh khung kim loại.	
Dây đeo chân chỉ vòng qua vòng kim loại mỏng.	
Đệm ngồi được kết nối với Băng Gai Dính và nghiêng về phía trước.	
Các phần sắc nhọn của ốc vít ngược hướng với người ngồi.	
Phần tựa lưng ở phía trên đệm.	
Các mũ màu đen bao bọc phần đầu của ốc vít.	
Các vành bánh xe đầy có cùng kích thước.	
Dây an toàn thấp hơn tựa tay.	
TOÀN BỘ XE LĂN	✓
Không có cạnh sắc.	
Khi đẩy, xe lăn di chuyển theo một đường thẳng.	
Các ốc vít của khung được vặn chặt.	
BÁNH XE SAU & BÁNH XE LĂN	✓
Các bánh xe phía sau và bánh xe lăn có thể xoay.	
Các ốc vít của trục được vặn chặt.	
Các lốp sau được bơm căng (theo áp suất lốp hoặc khi đè xuống nhỏ hơn 5mm).	
Các vành bánh xe đầy an toàn.	
PHANH	✓
Hệ thống phanh làm việc bình thường và dễ dàng kéo lại để khóa.	
CHỖ ĐỂ CHÂN	✓
Chỗ để chân chắc chắn.	
BÁO CÁO CÁC VẤN ĐỀ VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG:	✓
Gửi ảnh, mã số đơn hàng và mô tả vấn đề cần báo cáo đến WhatsApp: +1 (323) 996-9198.	
GHI CHÚ:	

MẪU XÁC NHẬN

Sử dụng mẫu này làm hướng dẫn để kiểm tra xem bạn đã điều chỉnh xe lăn cho người sử dụng xe lăn đúng cách chưa.

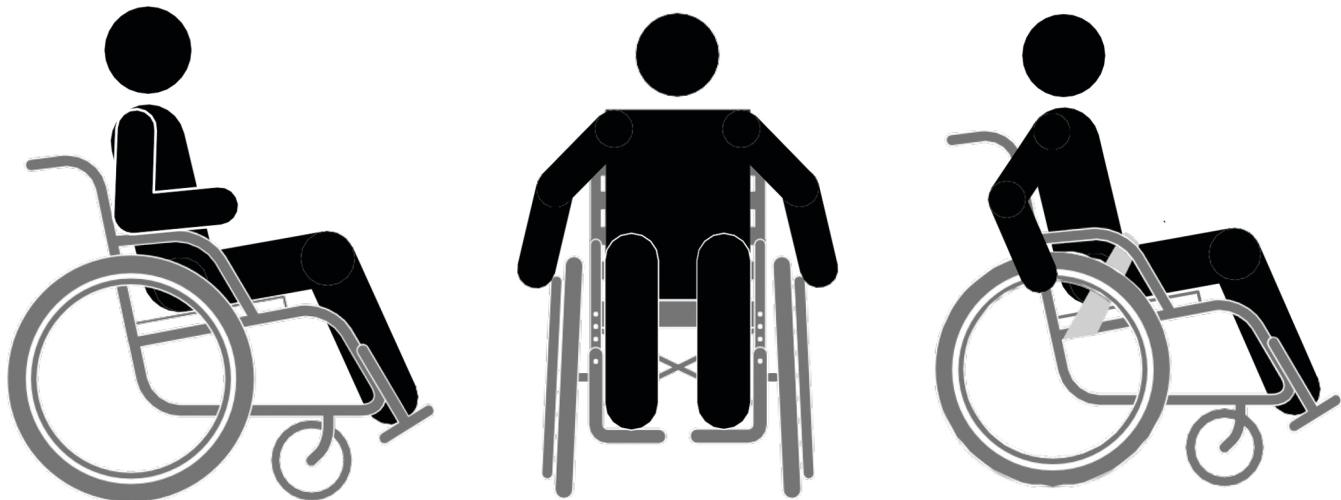

KIỂM TRA XE LĂN	
Hông của người ngồi phải ở phía sau xe lăn.	✓
Bàn chân của người ngồi phải đặt lên trên chỗ để chân.	
Có một khoảng trống từ 2-3 ngón tay ở giữa phía trên cùng của tựa lưng và phía dưới cùng của xương vai của người ngồi.	
Nếu người ngồi không tự đẩy, hãy di chuyển tựa lưng lên cao hơn để thoái mái. *Tựa lưng không nên cao hơn vai.	
Nên có một khoảng trống bằng chiều rộng của bàn tay giữa khung và hông của người ngồi theo chiều dọc. *Không nên có lực đè lên người ngồi.	
Có khoảng trống từ 2-3 ngón tay giữa phía trước của ghế và phía sau đầu gối của người ngồi.	
Dây an toàn phải thấp hơn hông của người ngồi.	
Tên	Tổ chức
	Ngày

ĐÀO TẠO NGƯỜI SỬ DỤNG



Sử dụng danh sách kiểm tra này như là hướng dẫn khi đào tạo người sử dụng xe lăn và/hoặc người chăm sóc họ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	
Nhận xét và cung cấp hướng dẫn sử dụng.	✓
Hiện thông tin liên hệ.	
ĐÀO TẠO LOÉT ĐIỂM TỦY	
Giải thích cách từ từ tăng thời gian ngồi trên xe lăn.	
Giải thích cách kiểm tra vết đỏ và vết loét mỗi ngày.	
Dạy 4 bài tập giảm áp (1 phút cứ sau 15-30 phút).	
DI CHUYỂN	
Dạy cách tự di chuyển.	✓
Dạy cách thực hiện di chuyển với sự trợ giúp của 1 người.	
Dạy cách thực hiện di chuyển với sự trợ giúp của 2 người.	
AN TOÀN	
Chỉ cách cài đặt phanh.	
Dạy cách tháo dỡ xe lăn khi không sử dụng.	
Dạy cách mở/đóng GEN_3 (nếu có).	
KỸ NĂNG DI CHUYỂN	
Dạy cách di chuyển xe lăn về phía trước & lùi lại.	✓
Dạy cách xoay xe lăn.	
Dạy cách đi lên và xuống dốc.	
Dạy cách đi lên và xuống lề đường.	
Dạy cách đi lên và xuống cầu thang.	
BẢO TRÌ	
Chỉ cách bơm lốp xe lăn.	✓
Giải thích cách vặn chặt các ốc vít (nếu lỏng).	
Giải thích cách lau sạch khung xe bằng dầu.	
Giải thích cách kiểm tra các bộ phận bị hỏng hoặc bị gãy (v.d. đệm, phanh, vòng bi).	